

photon nanoSkin-E

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

ЗМІСТ




1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ	3
2. КОМПЛЕКТАЦІЯ	5
3. ОГЛЯД ПРИЛАДУ	6
4. МЕТОД ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА	6
5. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ	7
6. МЕТОД ВИКОРИСТАННЯ	8
7. ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ	10
8. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	10
9. ХАРАКТЕРИСТИКИ	11
10. ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ	12
11. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	13





Дякуємо, що обрали прилад для інтенсивного омолодження шкіри обличчя Photon NanoSkin!

Перед першим використанням, будь-ласка, уважно прочитайте керівництво користувача для безпечного і правильного використання приладу та надійно зберігайте його для повторного ознайомлення у разі необхідності.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Заходи безпеки класифікуються як «НЕБЕЗПЕЧНО», «ПОПЕРЕДЖЕННЯ» або «УВАГА» для того, щоб чітко вказати рівень небезпеки і можливі травми або пошкодження, які можуть виникнути у разі неправильного використання приладу.

-  **НЕБЕЗПЕЧНО** - цей символ вказує, чого не можна робити.
-  **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** - цей символ вказує, з чим варто бути обережним.
-  **УВАГА** - цей символ вказує на те, що необхідно робити.

-  Не використовуйте цей прилад, якщо він має зовнішні пошкодження або несправності під час роботи.
-  Оскільки цей прилад має вбудований акумулятор, будь-ласка, не зберігайте його в умовах високої температури, тому що це може призвести до перегрівання акумулятора і, як наслідок, пожежі.
-  Не використовуйте адаптер для заряду приладу з напругою понад 100-240V, щоб уникнути пожежі, ураження електричним струмом тощо.
-  Не розбирайте і не намагайтеся ремонтувати прилад самостійно, щоб уникнути ураження електричним струмом.

- ⊘ Не використовуйте пошкоджений зарядний пристрій і не заряджайте прилад занадто довго. Це може спричинити ураження електричним струмом, коротке замикання тощо.
- ⊘ Будь-ласка, не дозволяйте дітям або підліткам користуватися цим приладом. Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці.
- ⊘ Цей прилад необхідно використовувати лише для догляду за шкірою обличчя та шиї. Будь-ласка, не використовуйте прилад на інших ділянках тіла та в будь-яких інших цілях.

⚠ Якщо ви будете використовувати акумулятор після того, як він перевищить строк своєї служби, всередині акумулятора може виникнути хімічна реакція, яка призведе до його деформації. Крім того, акумулятор може деформуватись під дією високих температур або під час падіння приладу. Якщо акумулятор у приладі було деформовано, будь-ласка, не використовуйте його.

⚠ Якщо під час використання приладу ви помітите незвичну реакцію шкіри, будь-ласка, негайно припиніть його використання.

⚠ Будь-ласка, використовуйте зарядний пристрій із комплекту належним чином, щоб уникнути несправності приладу, можливості виникнення пожежі або ураження електричним струмом.

⚠ Будь-ласка, негайно припиніть використовувати/заряджати прилад у випадку його надмірного нагрівання.


ⓘ Будь-ласка, перед першим використанням переконайтесь, що прилад не має слідів пошкодження.

ⓘ Обов'язково дотримуйтесь правил щодо використання приладу, які зазначені у цьому посібнику.

ⓘ Для заряду акумулятора використовуйте зарядний пристрій із комплекту.

- ⚠ Будь-ласка, уникайте потрапляння води на корпус приладу. Це може призвести до короткого замикання, ураження електричним струмом, пожежі тощо.
- ⚠ Будь-ласка, уникайте випадків падіння приладу, аби уникнути пошкодження і деформації його корпусу.
- ⚠ Після використання приладу обов'язково очищуйте електроди від залишків гелю. Для очищення маніпули не використовуйте засоби на масляній основі.
- ⚠ Прилад має вбудований літєвий акумулятор, який неможливо замінити на новий. Після закінчення строку служби акумулятора, прилад слід безпечно утилізувати.
- ⚠ Якщо у вас виникли питання щодо використання приладу, зателефонуйте до постачальника та отримайте професійну консультацію.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

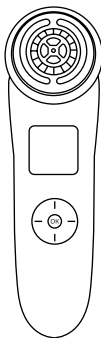

Прилад для ліфтингу x1



Керівництво користувача x1



Основа для заряду x1




Кільце для фіксації x1



Адаптер для заряду x1

ОГЛЯД ПРИЛАДУ

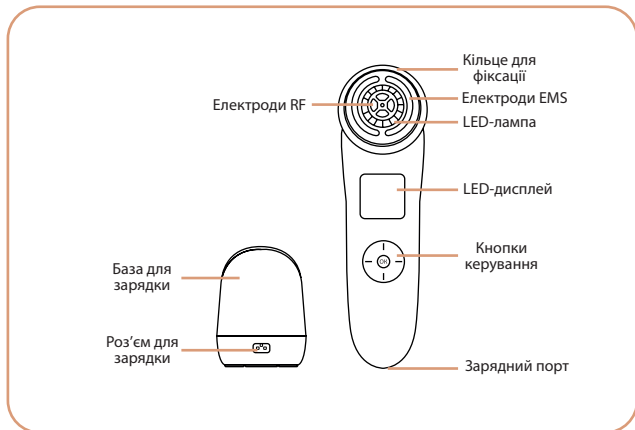

МЕТОД ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА

- Перш ніж використовувати прилад, обов'язково зарядіть акумулятор. Для заряду акумулятора використовуйте зарядний пристрій тільки із комплекту. Якщо ви використовуєте прилад за кордоном, будь-ласка, спочатку перевірте чи відповідає рівень місцевої напруги для заряду приладу.
- Перед зарядкою вимкніть прилад, підключіть адаптер до джерела живлення, інший кінець шнура підключіть до бази для зарядки. Помістіть прилад у базу.
- На головному екрані активується індикатор заряду акумулятора. Після закінчення заряду акумулятора індикатор буде відображати повний заряд.

- Після того, як акумулятор буде заряджено, зніміть прилад з бази і від'єднайте зарядний пристрій від джерела живлення. Якщо під час процесу заряду акумулятора адаптер нагрівається – це нормальне явище.
- Як правило, час повного заряду акумулятора становить близько 2 годин (залежно від температурних умов навколишнього середовища і рівня напруги джерела живлення).
- Якщо під час процедури омолодження потужність приладу недостатня, підключіть прилад до джерела живлення за допомогою зарядного шнура. Прилад може працювати від мережі.



ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

Рекомендації щодо використання

Відповідно до ваших потреб і вашого типу шкіри, встановіть один з 5 автоматичних режимів:

- RF + RED LIGHT: активація колагену, корекція зморшок.
- RF + ION: глибоке очищення шкіри.
- RF + ENI + PHOTON: швидке абсорбування активних речовин доглядової косметики.
- RF + EMS + PHOTON: моделювання чіткого овалу.
- COOL + PHOTON: звуження пор, зняття почервоніння шкіри і прояву набряків.

-
- ⚠ Обирайте необхідний режим і рівень інтенсивності відповідно до вашого типу шкіри.
 - ⚠ Будь-ласка, не використовуйте цей прилад надто часто. Це може завдати шкірі ушкодження.

Процедура	Функція	Косметологічний засіб	Час процедур	Частота процедур
Корекція зморшок	RF + RED LIGHT	Гель	3 хвилини	1 раз на 2 дні
Глибоке очищення	RF + ION	Ватний диск/ тонер	3 хвилини	1 раз на 2-3 дні
Живлення	RF + ENI + PHOTON	Сироватка/ маска	3 хвилини	1 раз на 2-3 дні
Формування контуру обличчя	RF+EMS+ PHOTON	Гель	5-15 хвилин	1 раз на 2 дні
Холодний компрес	COOL + PHOTON	-	3-5 хвилин	Кожен день

❗ Ватний диск та тонер необхідно використовувати лише під час режиму «RF+ION». Під час застосування інших режимів необхідно використовувати маску чи ступнопровідний гель на водній основі.



МЕТОД ВИКОРИСТАННЯ


Прилад має вбудовані конфігурації режимів, які працюють автоматично.

- 1 Перед використанням приладу необхідно очистити шкіру обличчя за допомогою спеціального засобу (тонік, засіб для зняття макіяжу).
- 2 Натисніть і утримуйте кнопку «ОК» протягом 2 секунд, щоб увімкнути прилад. Активується HD LCD екран.
- 3 Використовуйте кнопки «вгору – вниз», щоб вибрати необхідний режим. Кнопка «ОК» призначена для активації вибраного режиму. Натисніть кнопку «ОК» повторно, щоб перейти до меню і вибрати наступний режим.

- ④ Рівень інтенсивності будь-якого режиму (крім COOL) можна регулювати за допомогою кнопок «вліво-вправо».
 - ⑤ Перший крок: нанесіть на очищену шкіру обличчя струмопровідний гель, активуйте режим – корекція зморшок (RF + RED Light). Глибоке прогрівання шкіри та вплив червоного світла прискорять вироблення колагену та зменшать вираженість глибоких зморшок.
 - ⑥ Другий крок: зафіксуйте на приладі ватний диск за допомогою титанового кільця, нанесіть на ватний диск тонік. Активуйте режим глибокого очищення шкіри (RF + ION). Очистіть шкіру обличчя від забруднень та ороговілих частинок. Перед початком наступної процедури зніміть ватний диск з приладу.
 - ⑦ Третій крок: нанесіть на шкіру обличчя косметологічний засіб (сироватка, гель, маска). Глиняну маску та маску на масляній основі використовувати не рекомендується. Активуйте режим живлення (RF + ENI + PHOTON). Шкіра обличчя швидко поглине всі активні компоненти доглядової косметики.
 - ⑧ Четвертий крок: нанесіть на шкіру обличчя струмопровідний гель, активуйте режим формування контуру обличчя (RF + EMS + PHOTON). Розпочніть процедуру моделювання чіткого овалу.
 - ⑨ П'ятий крок: активуйте режим охолодження (COOL + PHOTON). Ця процедура має заспокійливу і антибактеріальну дію на шкіру: знімає запалення і набряки.
 - ⑩ Процедура омолодження завершена. Щоб вимкнути прилад, натисніть і утримуйте кнопку "OK" протягом 2 секунд.
-
- ⓘ Після завершення процедури омолодження нанесіть на шкіру обличчя зволожуючий крем для уникнення подразнення та сухості шкіри.
 - ⓘ Видимого та стійкого результату можна досягти за умови регулярного використання приладу.



ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ

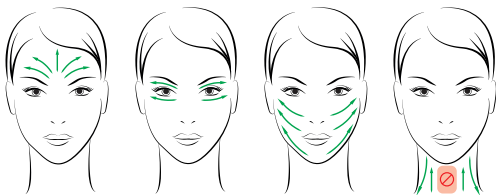

- 1 Ретельно опрацюйте лобову ділянку у вертикальному напрямку догори, після чого рухайтеся від центру до зовнішніх ліній лоба та скроней.
- 2 Пересувайте прилад уздовж верхніх повік від внутрішнього кута ока до зовнішнього. У тому ж напрямку рухайтеся під лінією нижніх повік.
- 3 Рухайтеся від центру підборіддя до мочок вух, від куточків губ до зовнішньої сторони щок і від крил носа до скроней.
- 4 Опрацюйте ділянку шиї у вертикальному напрямку як показано на малюнку, уникаючи місця розташування щитоподібної залози.



УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Можливі причини	Рішення
Прилад не заряджається.	Зарядний пристрій не підключений належним чином до джерела живлення.	Перевірте чи правильно підключений зарядний пристрій до джерела живлення або до самого приладу.
	Зарядний пристрій пошкоджено.	Використовуйте інший зарядний пристрій, що відповідає параметрам приладу.

Прилад не вмикається.	Не вдається натиснути на кнопку живлення.	Для активації приладу затисніть кнопку живлення на 2 секунди.
	Акумулятор недостатньо заряджений.	Зарядіть акумулятор.
Операційна несправність.	Низький рівень заряду акумулятора.	Зарядіть акумулятор.
	Прилад вимкнено.	Увімкніть прилад.
	Закінчився термін служби акумулятора.	Зверніться до сервісного центру.
	Ви не обрали режим.	Активуйте прилад та оберіть необхідний режим.
	Час роботи приладу закінчився.	Активуйте прилад та оберіть необхідний режим.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва	Photon NanoSkin-E
Модель	F82E
Акумулятор	7.4V, 650 mAh
Екран	1.5 дюйм, 240*240
Адаптер	100-240V, 0.35A; 9V=1.5A
Номінальна потужність	10 Вт
Потужність RF	1 MHz
LED	RED – 623 nm / BLUE – 465 nm
Час повного заряду акумулятора	2 години
Розмір	182.5 x 52.5 x 63.5 мм
Вага	280 г



ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

1 Для чого необхідно використовувати серветку або ватний диск під час процедури очищення шкіри?

Під час глибокого очищення шкіри серветка/ватний диск запобігають повторному контакту забруднень зі шкірою.

2 Як обрати рівень інтенсивності?

Рівень інтенсивності будь-якого режиму можна регулювати за допомогою кнопок «вліво/вправо».

3 Чи підходить цей прилад для неповнолітніх?

Відповідно до стану шкіри, цей прилад рекомендується використовувати для людей, віком старше 20 років.

4 Що я буду відчувати під час процедури?

Відповідно до обраного режиму, ви можете відчувати легке скорочення м'язів і тепло у глибоких шарах шкіри. Перед першим використанням приладу рекомендовано активувати найменшу інтенсивність, щоб ваша шкіра звикла до проведення подальшої процедури.

5 Для якого типу шкіри підійде даний прилад?

Цей прилад підходить для будь-якого типу шкіри. Якщо у вас жирна шкіра – застосовуйте високу інтенсивність імпульсів, якщо шкіра суха і чутлива – застосовуйте нижчу інтенсивність.

6 Чи можна використовувати цей прилад у ванній кімнаті?

Цей прилад не є водонепроникним, тому використовувати його у ванній кімнаті не рекомендується. Вода і вологе повітря можуть спричинити корозію внутрішніх деталей і, як результат, несправність приладу.

7 Кому не можна користуватися цим приладом?

Вагітні жінки, діти, люди, що мають алергічні реакції на шкірі, захворювання шкіри, металеві імплантати, відкриті рани, не повинні використовувати цей прилад.



ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Прилад F82E пройшов суворий контроль якості.

Будь-який виробничий дефект, що виник під час гарантійного періоду, буде безкоштовно відремонтований постачальником.

При зверненні до постачальника необхідно надати гарантійний талон.

Деталі гарантії

Безкоштовне гарантійне обслуговування приладу діє у разі будь-яких виробничих дефектів під час гарантійного терміну.

Гарантійне обслуговування буде відбуватися за рахунок споживача у випадках, якщо:

- Несправність виникла у разі неправильного та недбалого поводження з приладом.
- Несправність, викликана ремонтом в іншому сервісному центрі або магазині.
- Несправність у разі неправильного підключення до джерела живлення або несправності приладу для зарядки.
- У разі завершення терміну роботи деталей (акумулятор, плата і т.п.).

Про акумулятор

- Акумулятор – є витратним елементом (не підлягає гарантійному обслуговуванню).
- Якщо необхідно замінити акумулятор – зверніться до сервісного центру.

У разі, якщо під час звернення до сервісного центру споживач не має у наявності гарантійного талону або чеку, або несправність виникла після закінчення гарантійного терміну, прилад буде відремонтовано за рахунок споживача.

ЗА КОНСУЛЬТАЦІЄЮ ЗВЕРТАЙТЕСЬ:
WWW.LIFTING-LAB.COM